

VEINOPLUS® Arterial

Veinoplus arteriel er en helt nyt EMS løsning for behandling PAD (Perifer arteriel Disease). En almindelig vaculær sygdom, der rammer 3 til 10% af den totale befolkning (15-20% af de over 70-årige). Sygdommen skyldes, at arterierne i benene bliver fyldt op med plaque og de bliver derfor mindre i rørdiameter.


Hvorfor skal jeg bruge veinoplus arterial?

- 1 Der sker en stor forbedring i det arterielle flow.
- 2 Kan bruges i alle stadier af PAD
- 3 Ingen muskelischemi, ingen smerte
- 4 Bruges på de store vaskulære centre



Hvornår skal Veinoplus arterial bruges?

- 1 **Alle typer af PAD:**
Uregelmæssig puls
Kritisk ischæmi i benene
Arterielle sår
- 2 **Til revascularisations ødem:**
Både til forebyggelse eller behandling af ødem efter by pass operationer

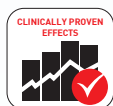

Se dokumentationen på vores hjemmeside www.adremtechnology.com

Hvordan virker det?

- 1 Sæt elektroderne på det eller de ramte ben, i siddende eller halvt siddende stilling.
- 2 Øg intensiteten langsomt for derved at se og føle en dyb muskelkontraktion.
- 3 Det er nemt at bruge: et enkelt program, der slukker automatisk efter 60 minutter.
- 4 Der er ingen risiko for at bruge det for meget. Jo mere du bruger det des bedre.

Må ikke benyttes i forbindelse med pacemaker eller implanteret defibrillator. Ved tvivl konsulter din læge.

Brugen af Veinoplus arterial kan ikke erstatte din behandling, rygeforbud, motion eller diæt.

 <p>Pakken indeholder : VEINOPLUS® Arterial enhed – Instruks manual – 1 par elektroder – ledning – 9V batteri – Pose - bærerem</p> <p>Ref: 3401051021131</p>	<h3>Tilbehør</h3>  <p>VEINOPLUS® Pakke elektroder Kompatibel med alle VEINOPLUS® enheder. Et par bio-kompatible elektroder, selvklæbende, kan genbruges op til 20/30 gange. Størrelse : 8 x 13cm</p> <p>Ref: 3401042705354</p>
--	---