


## VEINOPLUS® Arterial

Veinoplus arteriel er en helt nyt EMS løsning for behandling PAD ( Perifer arteriel Disease). En almindelig vaculær sygdom, der rammer 3 til 10% af den totale befolkning ( 15-20% af de over 70-årige). Sygdommen skyldes, at arterierne i benene bliver fyldt op med plaque og de bliver derfor mindre i rørdiameter.

### Hvorfor skal jeg bruge veinoplus arterial?

- 1 Der sker en stor forbedring i det arterielle flow.
- 2 Kan bruges i alle stadier af PAD
- 3 Ingen muskelischemi, ingen smerte
- 4 Bruges på de store vaskulære centre

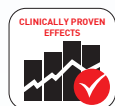

Se dokumentationen på vores hjemmeside [www.adremtechnology.com](http://www.adremtechnology.com)

### Hvornår skal Veinoplus arterial bruges?

- 1 **Alle typer af PAD:**  
Uregelmæssig puls  
Kritisk ischæmi i benene  
Arterielle sår
- 2 **Til revascularisations ødem:**  
Både til forebyggelse eller behandling af ødem efter by pass operationer

### Hvordan virker det?

- 1 Sæt elektroderne på det eller de ramte ben, i siddende eller halvt siddende stilling.
- 2 Øg intensiteten langsomt for derved at se og føle en dyb muskelkontraktion.
- 3 Det er nemt at bruge: et enkelt program, der slukker automatisk efter 60 minutter.
- 4 Der er ingen risiko for at bruge det for meget. Jo mere du bruger det des bedre.

**Må ikke benyttes i forbindelse med** pacemaker eller implanteret defibrillator. Ved tvivl konsulter din læge.

Brugen af Veinoplus arterial kan ikke erstatte din behandling, rygforbud, motion eller diæt.



Pakken indeholder : VEINOPLUS® Arterial enhed – Instruks manual – 1 par elektroder – ledning – 9V batteri – Pose - bærerem

Ref: 3401051021131

### Tilbehør



VEINOPLUS® Pakke elektroder  
Kompatibel med alle VEINOPLUS® enheder. Et par bio-kompatible elektroder, selvklæbende, kan genbruges op til 20/30 gange.  
Størrelse : 8 x 13cm

Ref: 3401042705354