

VEINOPLUS® back


VEINOPLUS® Back er et system, der kombinerer en kompleks og unik stimulation af rygmuslerne. Stimulationsmønstret inkluderer både TENS (transcutaneous electrical nerve stimulation) og NMES (Neuro Muscular Electrical stimulation) komponenter, og det er rettet imod alle typer af rygsmærter med følgende formål:

- 1 Mindske rygsmærter
- 2 Give en afslappende massage
- 3 Løsne muskelspærmer og infiltrationer
- 4 Udløse naturlige endorfiner og at nedsætte generel smerte


Hvornår kan jeg bruge VEINOPLUS® back: Kan bruges dagligt på smertefulde arealer eller zoner, der har brug for afslapning.




Upper back

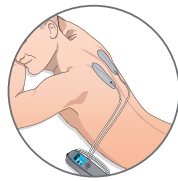

Middle back

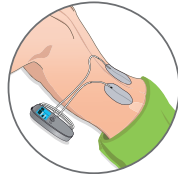

Lower back

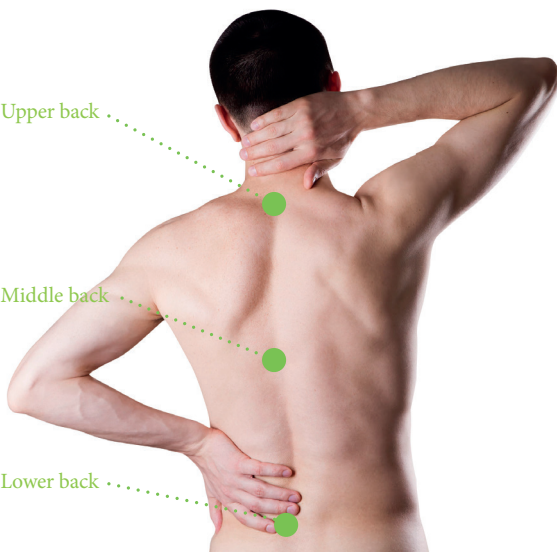

Hvordan virker det?

- 1 Sæt elektroderne på de smertefulde steder (skulder, nakke/ mellem skulderbladene/ lænderegionen)
- 2 Øg intensiteten langsomt
- 3 Det er nemt at bruge: Et enkelt program, der slukker automatiske efter 45 minutter
- 4 Der er ingen risiko for at bruge det for meget. Jo mere du bruger det, des bedre.

Må ikke benyttes i forbindelse med pacemaker eller implanteret defibrillator.
Ved tvivl konsulter din læge.

<p>Content : VEINOPLUS® Ryg enhed - Instruks manual – 1 par elektroder – ledning – 9V batteri – Pose – bærerem</p> <p>Ref: 3401040186520</p>	<h3>Tilbehør</h3> <p>VEINOPLUS® Pakke elektroder Kompatibel med alle VEINOPLUS® enheder. Et par bio-kompatible elektroder, selvklæbende, kan genbruges op til 20/30 gange. Størrelse : 8 x 13cm</p> <p>Ref: 3401042705354</p>
--	---