



## Dynamisk Fodkapsel


Fodkapsel designet i to dele i plast med en energilagrende fiberfjeder. Denne opbygning gør fodkapslen dynamisk, samtidig med at fodkapslen kontrollerer fodleddets og underbenets bevægelser. Springerlite® AFO designes til at give bedst mulige proprioceptive feedback til brugeren, og kan desuden forsynes med et sensomotorisk indlæg. Springerlite® AFO er også opbygget til at stimulere og støtte svage muskler omkring knæet.

Den to-delte konstruktion gør den meget let at påmontere og sikre, at hælen er placeret korrekt i kapslen. Denne konstruktion gør det desuden muligt at bruge inderkapslen alene under leg på gulv og i hvile.

Den passer for det meste i standard fodtøj/FF.fodtøj.

**Indikationer:** Valgus/Varus-fødder grundet CP eller anden neurologisk lidelse. Spidsfod som kan reponeres. Nedsat muskelfunktion i læg og lårmuskel.

**Kontraindikationer:** Extrem høj Tonus, kraftig spidsfod, nedsat sensibilitet

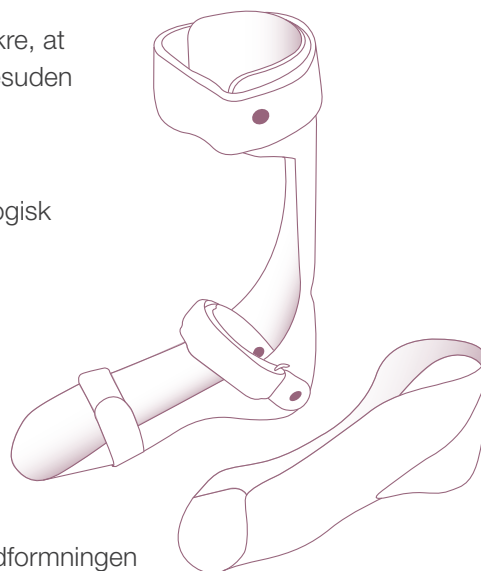

## Springerlite® AFO

Bandagisten analyserer det aktuelle behov, og designer derefter udformningen af fodkapslen, dens fjederkraft og stabilitet.

Skinnen laves individuelt på vores tekniske afdeling efter bandagistens måltagning. Fabrikeres i plast med en tynd inderskal, der klikkes ind i yderskallen. Fremstilles i mange farver.

